

contacta

Odbiornik sygnału z pętli indukcyjnej IL-RX20



Instrukcja obsługi

Spis treści

Dane produktu	4
Elementy	4
Działanie	5
Konserwacja	6
Rozwiązywanie problemów	7


Dane produktu

Odbiornik sygnału z pętli indukcyjnej to kompaktowe urządzenie odsłuchowe, które umożliwia osobom słuchać systemu pętli indukcyjnej tak, jakby nosili aparat słuchowy ustawiony w pozycji „T”

Zastosowanie obejmuje:

- Sprawdzanie, czy dźwięk pochodzi z pętli indukcyjnej
- Dla osób niedosłyszących, które nie noszą aparatu słuchowego
- Dla osób, których aparat słuchowy nie ma cewki „T”

Elementy

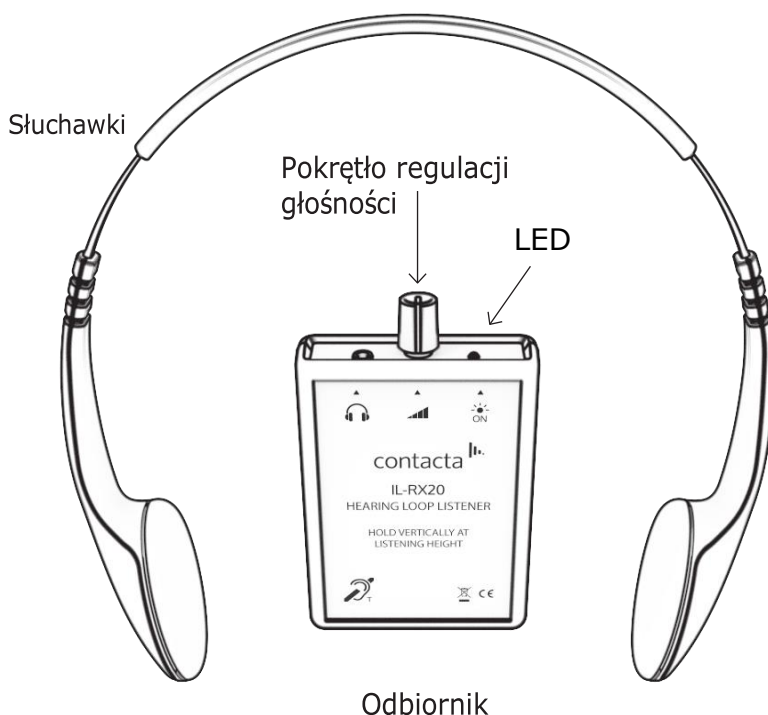

UWAGA: Urządzenie nie jest skalibrowanym testerem.

Użycie

Odbiornik sygnału jest zasilany dwiema bateriami alkalicznymi AA.

1. Umieść zestaw słuchawkowy na obu uszach i wyreguluj boczne ramiona, aż będą wygodnie dopasowane
2. Przytrzymaj urządzenie w pozycji pionowej na wysokości głowy, aby naśladować pozycję aparatu słuchowego



3. Włącz urządzenie, obracając pokrętkę regulacji głośności powoli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania komfortowego poziomu głośności. W razie potrzeby obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność.
4. Jeśli dioda LED się nie świeci, sprawdź czy baterie są naładowane i prawidłowo włożone, jak pokazano na rysunku wewnątrz komory na baterie.
5. Jeśli dioda LED świeci się, ale nadal nie słychać żadnego dźwięku, poproś współpracownika lub inną osobę o mówienie do mikrofonu pętli indukcyjnej lub przetestuj źródło sygnału wejściowego, jeśli jest podłączone do systemu dźwiękowego. Ponownie sprawdź odbiór sygnału z pętli.
6. Po zakończeniu korzystania z urządzenia wyłącz je, obracając pokrętkę regulacji głośności w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż dioda LED przestanie świecić.

Ważne:

Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane, aby przedłużyć żywotność baterii

Zawsze trzymaj urządzenie pionowo podczas odsłuchu sygnału z pętli, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność

Konserwacja

Aby przedłużyć żywotność produktu, należy regularnie wykonywać poniższe czynności w celu zapewnienia najlepszej możliwej jego wydajności:

- czyść suchą, miękką ściereczką lub łatwo dostępnymi chusteczkami czyszczącymi
- nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników i nie dopuszczaj do przedostania się płynów czyszczących do wnętrza urządzenia

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa usterka	Działanie
Nie świeci się kontrolka zasilania	1) Bateria jest rozładowana 2) Awaria wewnętrzna	1) Wymień baterie nowe 2) Zwróć się o pomoc
W pętli indukcyjnej słychać szum/gwizd/syczenie	1) Zakłócenia sieciowe	1) W górnej części komory baterii urządzenia znajduje się przełącznik filtra szumów, do którego dostęp można uzyskać po wyjęciu baterii. Przesuń przełącznik w prawo, aby go włączyć.
Dźwięk nie jest słyszalny przez pętlę indukcyjną	1) Nie jest ustawiona wystarczająco wysoka głośność 2) Słuchacz znajduje się w nieodpowiedniej odległości od pętli indukcyjnej 3) Pętla indukcyjna nie działa 4) Uszkodzone słuchawki lub gniazdo 5) Awaria wewnętrzna.	1) Zwiększ głośność w słuchawkach 2) Zbliź się do pętli indukcyjnej 3) Poproś innego słuchacza pętli lub użytkownika aparatu słuchowego (jeśli jest taka możliwość), aby upewnić się, że pętla indukcyjna nie działa. Jeśli zostanie to potwierdzone – należy zwrócić się o pomoc. 4) Wymień uszkodzone słuchawki na sprawne. 5) Wykonaj krok 3. Jeśli dźwięk jest słyszalny przez pętlę indukcyjną, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.



Sprzedawca:

www.contacta.co.uk
www.akustyk.pl